



mamajoo

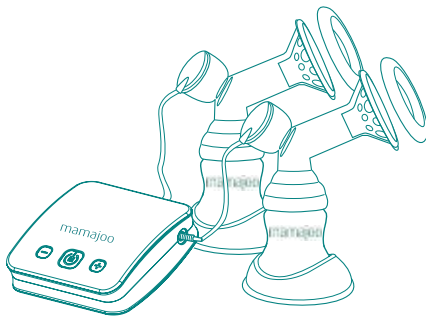

- DE** Mamajoo Elektronische Doppel Milchpumpe mit USB Anschluss
- EN** Mamajoo Electronic USB Double Breast Pump
- FR** Mamajoo Tire-Lait Electronique USB Double
- TR** Mamajoo Elektronik USB Çiftli Göğüs Pompası

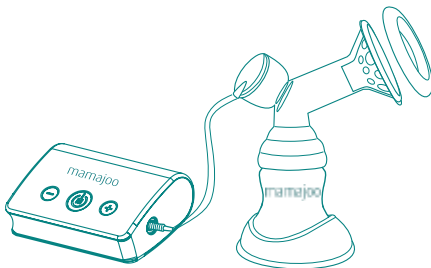

- DE** Mamajoo Elektronische Milchpumpe mit USB Anschluss
- EN** Mamajoo Electronic USB Single Breast Pump
- FR** Mamajoo Tire-Lait Electronique USB Simple
- TR** Mamajoo Elektronik USB Tekli Göğüs Pompası

mamajoo

Index

DE	4
EN	11
FR	18
TR	25

Bedienungsanleitung / Garantie

Instructions / Warranty

Mode D'Emploi / Garantie

Kullanım Kılavuzu / Garanti

**KUNDENDIENST
FOR SERVICE POINTS
POUR LES POINTS DE SERVICE
SERVİS NOKTALARI İÇİN**

mamajoo GmbH

Technologie Park
Eupener Straße 161A Eingang 76
50933 Köln Germany
Tel: 0221 168 489 00
E-mail: info@mamajoo.de
www.mamajoo.de

GRUP
Baby

GRUP ELEKTRONİK İÇ VE DIŞ TIC.LTD.ŞTİ.
Mimar Sinan Mah. Özgürlük Cad. No:77 / 1-2-3-4
Sultanbeyli/İSTANBUL
Tel: 0216 573 62 00(pbx)
e-mail: destek@grupbaby.com
www.grupbaby.com

DE Sehr geehrte/r Kundin/Kunde,

Wir bedanken uns dafür dass Sie ein mamajoo-Produkt ausgewählt haben. Bei der Herstellung von mamajoo Baby-Produkten steht die Gesundheit der Babys im Vordergrund. In unseren internationalen Normen entsprechenden Produktionsstätten werden deshalb nur Produkte nach den Europäischen Standards aus hochwertigen Premiumrohstoffen und BPA-frei, hergestellt. Unsere Kontaktdaten, über die Sie uns für Informationen und Fragen zu unseren Produkten erreichen können, befinden sich Ende dieser Anleitung. Bewahren Sie diese Anleitung für zukünftigen Bedarf auf.

EN Dear Consumer,

Thank you for choosing Mamajoo products. Mamajoo products meet the stringent EU standards as they are designed and produced with highest quality BPA free raw materials combined with latest high technology, by considering health and safety. For more information and your questions, you can find our contact details at the end of this instructions leaflet. Please keep this leaflet for future references.

FR Cher(e) Client(e),

Merci de choisir les produits Mamajoo. Dans la fabrication de nos produits, en visant la santé de maman et son bébé, nous utilisons les technologies de pointe et des matières sans BPA de première qualité, conformes aux normes de l'Union Européenne. Pour tout renseignement complémentaire ou vos questions sur nos produits, les coordonnées sont fournies à la fin du mode d'emploi présent. Veuillez garder ce document pour toute référence future.

TR Değerli Tüketicimiz,

Mamajoo ürünlerini tercih ettiğiniz için teşekkür eder, bebeğinizi sağlık ve mutlulukla büyümenizi dileriz. Mamajoo ürünlerinin üretim sürecinde anne ve bebek sağlığı ön planda tutularak en son teknoloji ile Avrupa Birliği standartlarına uygun en yüksek kalitede, gıdaya uygun ve BPA içermeyen hammaddeler kullanılmıştır. Ürünlerimizle ilgili bilgiler ve sorularınız için bize ulaşabileceğiniz iletişim bilgilerimiz bu kılavuzun sonunda yer almaktadır. İleride gerekebileceğinden, lütfen bu kılavuzu saklayınız.

HINWEISE

1. Bitte die Bedienungsanleitung vor dem Benutzen sorgfältig lesen.
2. Vor der ersten und jeder Benutzung alle mit der Muttermilch in Kontakt kommende Teile Ihrer Pumpe entfernen, sorgfältig reinigen und mittels 5 Minuten im Wasser kochen oder Verwendung der mamajoo Dampf-Sterilisatoren sterilisieren. Um Beschädigungen der Pumpenkomponenten zu vermeiden, nicht länger als empfohlen sterilisieren.
3. Die Motor-Einheit NIEMALS nass machen oder mit einem nassen Tuch reinigen.. Die Luftflasche der Pumpe und die nicht in Kontakt mit der Muttermilch kommenden Teile NIEMALS sterilisieren.
4. Die mechanischen Teile der Pumpe per Hand in lauwarmen Seifenwasser reinigen und gut ausspülen oder im oberen Fach der Spülmaschine spülen.
5. Keine Poliermittel, abreibende oder antibakteriellen Produkte für die Reinigung des Produktes verwenden da sie Ihren Gerät Schaden zufügen können.
6. Für den Betrieb der mamajoo Elektronische Milchpumpe mit USB Anschluss Nur den Original Adapter verwenden. Nach jeder Benutzung sicherstellen das das Gerät ausgeschaltet und der Stecker gezogen ist.
7. Bei Überfüllung von der kleinen Babyflaschen würde den Motor Schaden zufügen. Wenn Sie über 120ml. Milch saugen bitte benützen Sie eine Große Flasche.
8. Nicht in Reichweite von Babys und Kleinkindern aufbewahren.
9. Ein sehr Starker und Schneller Saugrhythmus kann Schmerzen verursachen, deshalb stellen Sie sicher dass Sie die richtige Saug Einstellung haben.
10. Vergewissern sie sich vor jeder Benutzung dass der Silikon Komfortaufsatz richtig auf der Trichterförmigen Öffnung sitzt, da ansonsten Milch auslaufen kann
11. Bei einer Störung, den Stecker des Gerätes aus der Steckdose ziehen. Bei Bedarf einer Wartung sollte dieses Produkt wegen eines Stromschlag-Risikos nur vom autorisierten Wartungstechniker geöffnet werden. Bei einem Schaden des Stromkabels, nicht selber reparieren: Sie können mit uns über **www.mamajoo.de** Kontakt aufnehmen, damit wir Sie an unseren Kundendienst weiterleiten können.
12. Den Stöpsel (P) von der mamajoo Elektronische Doppel Milchpumpe bitte nicht zu Kräftig herausziehen
13. Die Bedienungsanleitungen immer beachten. Unsere Firma haftet nicht für Schäden die durch fehlerhafte Benutzung entstehen.

WARTUNG

1. Die Motor-Einheit nur mit einem trockenen Lappen reinigen. Kein Poliermittel, abreibende oder antibakterielle Produkte für die Reinigung verwenden
2. Kontrollieren Sie regelmäßig die Anschlüsse zur Luftkammer und achten sie darauf das das Ventil richtig sitzt.
3. Die mechanischen Teile der Pumpe und die Milch-Aufbewahrungsbehälter können sicher in Spülmaschinen gewaschen werden, jedoch kann eine Verfärbung durch die Nahrungsmittel eintreten.



Den Schlauch nicht sterilisieren oder Waschen. Das Wasser im Schlauch kann den Motor Beschädigen.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Volle Kontrolle durch neu entwickelte Mikroprozessor-Technik.
- Die Vorgänge und Symbole können auf der LCD-Anzeige verfolgt werden.
- Dank USB Anschluss mit min. 2600 mA Externen Akku auch Unterwegs einsetzbar.

Produkt Name: Mamajoo Elektronische Doppel Milchpumpe mit USB Anschluss

Modell: MMJ2858

Adapter: Input: 100- 240V ~ 50/60Hz Output: 5-6V 1A DC

Betriebszeit: 0-30 Minuten

Gewicht: 0.170 kg


Produkt Name: Mamajoo Elektronische Milchpumpe mit USB Anschluss

Modell: MMJ2841

Adapter: Input: 100- 240V ~ 50/60Hz Output: 5-6V 1A DC

Betriebszeit: 0-30 Minuten


Gewicht: 0.150 kg

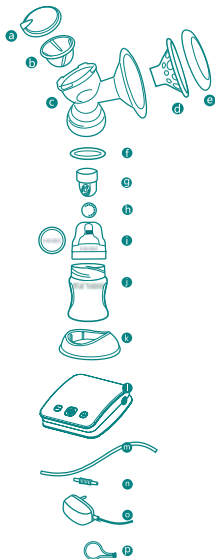

Elektronische Doppel Milchpumpe mit USB Anschluss

Produktkomponenten

- a) Zylindrischer Deckel
- b) Silikon Membran
- c) Pumpenkörper
- d) Silikon Komfortaufsatz
- e) Pumpe Hygienedeckel
- f) Silikon Verdichtung
- g) Ventil
- h) Ventil Deckel
- i) Flaschensauger und Verschluss Ring
- j) Muttermilch Aufbewahrungsbehälter 150 ml
- k) Standuntersatz für Aufbewahrungsbehälter
- l) Motor Gehäuse
- m) Luft Tube
- n) Luft Tube Motoreingang hülse
- o) 220 V Netz Adapter
- p) Stöpsel

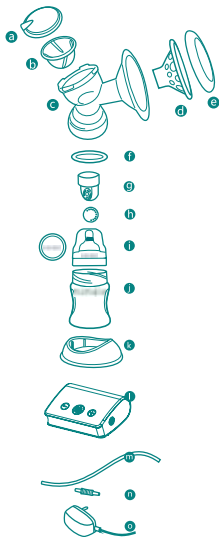


Elektronische Milchpumpe mit USB Anschluss

Produktkomponenten


- a) Zylindrischer Deckel
- b) Silikon Membran
- c) Pumpenkörper
- d) Silikon Komfortaufsatz
- e) Pumpe Hygienedeckel
- f) Silikon Verdichtung
- g) Ventil
- h) Ventil Deckel
- i) Flaschensauger und Verschluss Ring
- j) Muttermilch Aufbewahrungsbehälter 150 ml
- k) Standuntersatz für Aufbewahrungsbehälter
- l) Motor Gehäuse
- m) Luft Tube
- n) Luft Tube Motoreingang hülse
- o) 220 V Netz Adapter

MONTAGE


Bitte Waschen sie Ihre Hände sorgfältig und Sterilieren Sie die Mechanischen Teile bevor Sie Ihre Pumpe benutzen.

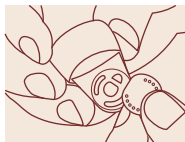

Ventil Deckel in gerader Position genau über das Ventil setzen

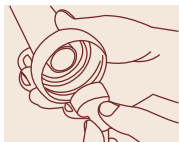

Drücken Sie denn Ventil fest in die Pumpe.

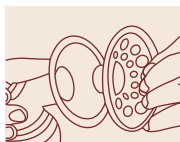


Setzen sie den Silikon Komfortaufsatz auf den Pumpen Körper auf.



Setzen sie den Silikon Membran in die Pumpe und seien sie sicher das fest sitzt.



Setzen sie denn Zylindrischer Deckel auf die Pumpe und Verschließen sie es durch drehen.

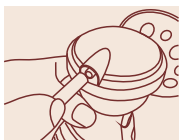


Stecken sie den luftschlauch auf den Zylindrischer Deckel




Montieren sie die Babyflasche auf die Pumpe.




Für Unterwegs schließen sie den USB Stecker an eine Energie Quelle an.

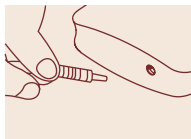**Doppel Pumpe**


Schließen sie die zweite Luft Tube an die Motorgehäuse an.

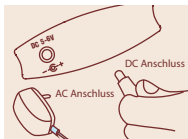**Doppel Pumpe**


Stecken sie denn Kabel mit Metall Stecker an Adapter an (5V-6V) und den Adapter ins Netz. 110V-220V)

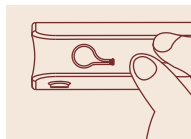**Doppel Pumpe**

Beim Einzel Gebrauch von der Pumpe seien sie sicher das der zweiter Lufteingang fest verschlossen ist mit Stöpsel. Ansonsten wird Ihre Pumpe nicht Sagen.

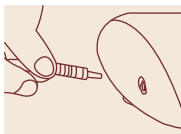**Einzel Pumpe**

Schließen sie die zweite Luft Tube an die Motorgehäuse an.

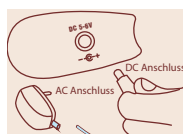**Einzel Pumpe**

Stecken sie denn Kabel mit Metall Stecker an Adapter an (5V-6V) und den Adapter ins Netz. 110V-220V)

ANLEITUNG FÜR LED ANZEIGE

Mamajoo Elektronische Doppel Milchpumpe mit USB Anschluss



8 Verschiedene Massagepositionen



12 Verschiedene Saugpositionen



Doppelpumpe bei Massageposition
3. Stufe ist eingestellt


Beispiel



Einzelpumpe bei Saugposition
7. Stufe ist eingestellt

LED Anzeige

- a) Einzelpumpe Massage/Saug Modus
- b) Doppel Massage/Saug Modus
- c) Ein, Aus und Einzel, Doppelpumpe Auswahl Taste.
- d) Saug Stärke Langsam
- e) Saug Stärke Schnell
- f) LED Stufen Anzeige

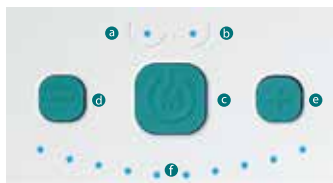

Mamajoo Elektronische Milchpumpe mit USB Anschluss




5 verschiedene Massagepositionen



10 Verschiedene Saugpositionen

LED Anzeige

- a) Massage-Modus
- b) Saug-Modus
- c) Ein/Aus Schalttaste und Einzel, Doppel Einstellung
- d) Taste zur Minderung der Saugleistung
- e) Knopf zur Erhöhung der Saugleistung
- f) LED Stufen Anzeige

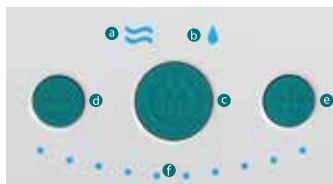

BENUTZUNG

Netzbetrieb:

1. Vergewissern Sie sich dass die Pumpe richtig montiert ist.
 2. Wenn sie Ihre mamajoo Doppel Milchpumpe einzeln benützen wollen bitte mit den auf der Pumpe befindlichen Stöpsel den zweiten Schlauch Anschluss fest verschließen.
 3. Setzen Sie sich in einen bequemen Sessel und nehmen Sie die Pumpe in die Hand, mit der Sie es leichter bedienen können. Bitte, die Pumpe nicht im Liegen benutzen.
 4. Setzen Sie den Silikon-Komfortaufsatz Ihrer Pumpe mittig zu Ihrer Brustwarze an und stellen Sie sicher dass es luftdicht und mittig auf Ihrer Brust sitzt.
 5. Stecken Sie den Stecker des Produkts in die Steckdose, drücken Sie den "Ein-/Ausschalttaste" und leiten Sie den Saugvorgang ein. Wir empfehlen die Pumpe zunächst in Massage-Modus zu benutzen um den Milchfluss zu simulieren.
 6. Mamajoo Milchpumpen simulieren die Natürliche Babysaugreflex.
- 6.1.** Die Massageposition Imitiert den normalen Saugrhythmus des Babys, um den Auslauf Reflex zu erwecken. Bei den ersten 5 Massagestufen ist nach jeden 10. kurz saug eine lange Saugleistung. Nachdem Ihre Milch begonnen hat zu fließen Noch einmal auf Ein/Ausschaltknopf drücken um den Saugmodus zu starten. Sie können jederzeit mit dem "+" oder "-" Knopf einen von den 10 Saugpositionen den gewünschten Saugrhythmus einstellen. Mütter mit sensiblen Brustwarzen können auch in Massagemode absaugen. Dank seiner neu Entwickelten Mikroprozessor-Technik wird bei der nächsten Benutzung in zuletzt verwendeten Modus starten.
- 6.2.** Wenn Sie das Gerät einschalten Startet es mit der Einzel Saug-Modus an damit die Mütter zwischen einzeln oder Doppel saug wählen können. Bei beiden Saug-modus sind die ersten 4 Stufen (0-4) für Massage-Modus und von 5 bis 10 sind 5 Stufen Saug-Modus. Die Massageposition Imitiert den normalen Saugrhythmus des Babys. Um den Auslauf Reflex zu erwecken. Bei den ersten 4 Massagestufen ist nach jeden 10. kurze eine lange Saugleistung. Nachdem Ihre Milch begonnen hat zu fließen Noch einmal auf Ein/Ausschaltknopf drücken um den Saugmodus zu starten. Den Saugrhythmus können sie zwischen 5 und 10 wählen. Mütter mit sensiblen Brustwarzen können in Massage Modus Absaugen. Wenn sie einzeln saugen wollen vergewissern Sie sich das auf Einzel Mode eingestellt ist. Dank seiner neu entwickelten Mikroprozessor-Technik wird bei der nächsten Benutzung Ihre Pumpe in letzten verwendeten Modus starten.
- 7.** Schalten Sie nach Abschluss des Saugvorgangs Ihre Milchpumpe aus in dem Sie 2 Sekunden auf den Ein/Ausschaltknopf drücken und nehmen Sie es aus der Steckdose. Entfernen Sie den Vollen Muttermilch-Aufbewahrungsbehälter von der Pumpe.

Setzen sie den mamajoo Flaschensauger auf und füttern Ihr Baby oder Bewahren sie den Aufbewahrungsbehälter verschlossen mit mamajoo Verschlussringe im Kühlschrank oder Tiefkühltruhe auf.

8. Mamajoo Elektronische Milchpumpen mit USB Anschluss werden sich nach 30 Minuten Betrieb in Saug-Modus sich automatisch abschalten.

Betrieb über USB Anschluss:

Sie können Ihr Gerät an eine Externe Akku, Powerbank, Rechner oder Ladegerät mit USB Kabel anschließen. Bitte vergewissern sie sich das die vorgegebene Spannung gewährleistet wird. Der Ab-pump Vorgang ist wie bei Netz Anschluss.

WARNUNG

Die Produkte dürfen nur in Original Verpackung, in Richtlinien der Hinweise auf Verpackung, fern vor Heizkörper, Feuer und Stößen geschützt Transportiert werden.

Nicht in Nassen oder Feuchten Räumen Lagern.

GARANTIEERKLÄRUNG

Sehr geehrte/r Kundin/Kunde

Hiermit gewährt Ihnen die mamajoo GmbH Garantie für das Produkt MMJ2858- MMJ2841 für den Zeitraum von 24 Monaten. Der Garantiezeitraum beginnt ab Kaufdatum. Tritt innerhalb des genannten Zeitraums ein Problem mit dem Produkt auf, das auf fehlerhaftes Material oder die Verarbeitung zurückzuführen ist, können Sie das Produkt Ihrem Händler vor Ort zurückbringen. Unser Reparatur-Service wird das beschädigte Produkt prüfen und gegebenenfalls reparieren. Sollte die Reparatur voraussichtlich mehr als 7 Tage in Anspruch nehmen oder unangemessene Kosten verursachen, stellen wir Ihnen ein Ersatzprodukt zur Verfügung.

Ist es Ihnen nicht möglich das Produkt dem Händler direkt zu übergeben, verpacken Sie es bitte so, dass es beim Transport nicht weiter beschädigt wird, und senden Sie es mit einer Rechnungskopie an folgende Adresse: mamajoo GmbH Eupenerstr.161A-76 50933 Köln Deutschland. Das reparierte Produkt bzw. das Ersatzprodukt wird Ihnen dann an Ihre Adresse: geliefert. Die Kosten für den Hin- und Rückversand übernehmen wir.

Um einen möglichst schnellen Service zu gewährleisten, möchten wir Sie bitten, uns zusätzlich eine detaillierte Beschreibung der Schadensursache mit zu schicken.

ATTENTION

1. Please read all instructions carefully before using.
2. Before first and before & after each use; separate all parts in contact with breast milk, wash properly and sterilise with Mamajoo steam steriliser or boiling them for 5 minutes. Do not sterilise longer than recommended period to avoid damages.
3. Do not expose the motor unit and electrical equipment to liquid and moisture or humidity, do not clean with wet cloth. Never sterilise pump air tube and components which are not in contact with breast milk.
4. Wash the pump's mechanical parts in warm soapy water and rinse or wash in dishwasher top rack.
5. Avoid cleaning with anti-bacterial detergents and abluents that may cause damage or cracking on the product. In such a case please do not use the damaged pieces.
6. Use Mamajoo Electronic USB Breast Pumps with ONLY the original adapter. Check if it turns off correctly after each use and unplug the power cord.
7. Do not exceed the capacity of the breast milk storage / feeding container to avoid motor unit damages. If you get more than 120 ml milk when you pump please use a larger feeding bottle.
8. Keep out of reach of children and babies.
9. Extra hard and fast milk expression may cause pain so that please ensure the power is right for you.
10. If the silicone comfort cushion does not fit correctly to the funnel, the milk flows out from silicone comfort cushion, please check it before each use.
11. When a problem occurs, unplug the power cord or remove the product from the external charger. In case of any requirements of service, please contact us to direct you to our technical customer service.
12. Please be very careful not to pull too strong the stopper (p) of Mamajoo Electronic USB Double Breast Pump.
13. There must be strict compliance with the instructions. Our company will not be held responsible for any damage caused by improper use.

MAINTENANCE

1. Clean the motor unit **ONLY** with a dry cloth. Do not use abrasive or anti-bacterial detergents.
2. Check regularly that the air tube connections are made correctly and the membrane is not damaged.
3. The pump body and the breast milk storage containers can be washed in the dishwasher top rack. However a color change can be occur due to foods.



The tube cannot be sterilized or washed. The water left in the tube might destroy the motor part.

TECHNICAL FEATURES

The advanced intelligent microprocessor technology provides complete control. Processes and signs can be easily monitored from LED indicators. It can be used with an external charger (powerbank) for outdoor? use. External charger must have min. 2600 mA real capacity.

Product Name: Mamajoo Electronic USB Double Breast Pump

Product Code: MMJ2858

Adaptör: Input: 100- 240V ~ 50/60Hz Output: 5-6V 1A DC

Run Time: 0-30 minutes

Weight: 0.170 kg


Product Name: Mamajoo Electronic USB Single Breast Pump

Product Code: MMJ2841

Adaptör: Input: 100- 240V ~ 50/60Hz Output: 5-6V 1A DC


Run Time: 0-30 minutes

Weight: 0.150 kg

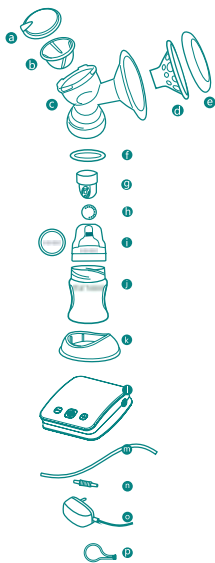

Electronic USB Double Breast Pump product components

- a) Cylinder Cover
- b) Silicone Diaphragm
- c) Pump Body
- d) Silicone Comfort Cushion
- e) Hygiene Cover
- f) Silicone Sealant
- g) Valve
- h) Membrane
- i) Bottle Teats and Sealing Disc
- j) Breasts Milk Storage Container (150 ml)
- k) Storage Container Base
- l) Motor unit
- m) Air Tube
- n) Air Tube – Motor Unit Insert
- o) AC adapter
- p) Stopper

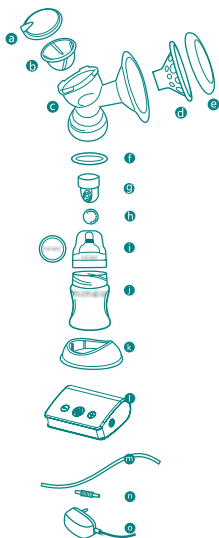

Electronic USB Single Breast Pump product components

- a) Cylinder Cover
- b) Silicone Diaphragm
- c) Pump Body
- d) Silicone Comfort Cushion
- e) Hygiene Cover
- f) Silicone Sealant
- g) Valve
- h) Membrane
- i) Bottle Teats and Sealing Disc
- j) Breasts Milk Storage Container (150 ml)
- k) Storage Container Base
- l) Motor unit
- m) Air Tube
- n) Air Tube – Motor Unit Insert
- o) AC adapter


HOW TO ASSEMBLE

Before starting to assemble, please wash your hands.

Before using wash and sterilize the mechanical pieces of the breast pump.



Snap the membrane onto valve until it lies completely flat.

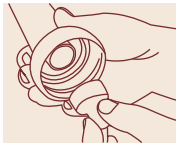

Push assembled valve to the pump body tightly.




Place the silicone comfort cushion over the pump body funnel.



Place the silicone diaphragm onto the pump body.



Screw the cylinder cover onto the pump body.

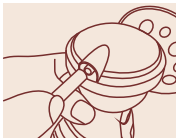


Insert the end of the air tube into the air port of the cylinder cover.



Screw breast milk storage container to the pump body.




Insert the USB plug into the charging source output for mobile use.

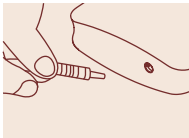

Double Breast Pump

Insert the other end of air tube into the port of the motor unit.

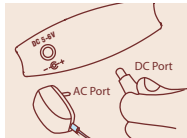


Double Breast Pump

Insert the metal plug at the end of adapter into the adapter input on the motor unit. (5V-6V)
Plug in the adapter. (110V-220V)




Double Breast Pump

Make sure the stopper is firmly connected to the second output for single use. In case of an air escape, pump will not function correctly.

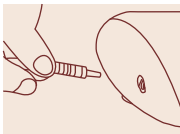

Single Breast Pump

Insert the other end of air tube into the port of the motor unit

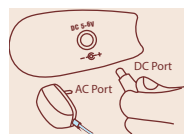

Single Breast Pump

Insert the metal plug at the end of adapter into the adapter input on the motor unit.
Plug in the adapter.

LED INDICATOR MANUAL

Mamajoo Electronic USB Double Breast Pump



8 different level options of massage mode



12 different level options of suction mode



Double massage mode
Functions on 3th level


Example



Single suction mode
Functions on 7th level

Control Panel

- a) Single Breast massage/suction mode
- b) Double Breast massage / suction mode
- c) On/Off and Double/Single mode changing button
- d) Suction decrease button
- e) Suction increase button
- f) LED level indicator

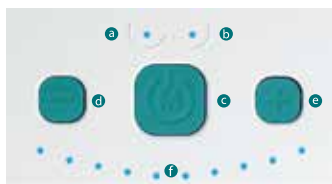

Mamajoo Electronic USB Single Breast Pump




5 different massage mode options



10 different suction mode options

Control Panel

- a) Massage position
- b) Suction position
- c) On/Off and massage/suction mode changing button
- d) Suction decrease button
- e) Suction increase button
- f) LED level indicator

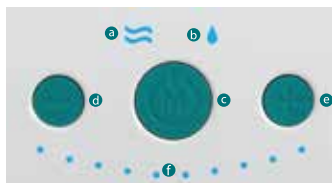

OPERATION

With Adapter:

1. Make sure the breast pump is assembled correctly.
2. For single use, insert the stopper which is located on the motor unit tightly into the second pump air tube input.
3. Sit on a comfortable chair and relax, hold the pump with your hand which you feel comfortable with. Do not use breast pump in leaning position.
4. Center the pump funnel with silicone comfort cushion over your nipple. Make sure it seals your breast completely.
5. Plug in and press 'On/Off' button to start suction. We recommend you to start with massage mode to stimulate your milk flow.
6. Mamajoo Breast Pumps mimic baby's natural suckling rhythm.
 - 6.1. When you press the On/Off button of Mamajoo Electronic USB Single Breast Pump one time, indicator LED at the upper left lights up for the massage mode, if you press the button for a second time indicator LED at the upper right lights up for the suction mode. The massage mode is for to alert the 'let-down' reflex which is like the baby starts to suck the mother's breast. At the first 5 levels for the massage mode; after each 10 short shots a long shot occurs, when your milk starts to flow press the "On/Off" button again and switch the suction mode. You can select the desired expression mode between 1-10 power levels and with "+" or "-" buttons you can adjust suction power. Mamajoo Electronic USB Double/Single Breast Pump saves in memory the last steps you used with its intelligent microprocessor technology. At your next use, the breast pump will start on massage mode and on the last level you used.
 - 6.2. Once you press "On/Off" button, Mamajoo Electronic USB Double/Single Breast Pump starts to run on single mode for offering single use or double use options to the mother. Both for single use or double use first 4 level is for massage mode and the levels from 5 to 10 are for the suction mode. The massage mode is for to alert the 'let-down' reflex which is like the baby starts to suck the mother's breast. At the first 4 levels for massage mode which occurs after each 10 shots short and a long shot when your milk starts to flow press "+" key again and switch the suction mode. You can select the desired expression mode between 5-10 power levels. If you would like to use single suction, make sure that the pump is on single mode. Mamajoo Electronic USB Double/Single Breast Pump, saves in memory the last steps you used with its intelligent microprocessor technology. At your next use, the breast pump will start on single suction mode and on the last level you used.

- When the expression is finished, press “ On/Off” button for 2 seconds and unplug it. Take out the breast milk storage container from the pump. Place the Mamajoo sealing disc on the breast milk container and put into the fridge or the freezer or feed your baby directly.
- Mamajoo Electronic USB Breast Pumps automatically shuts off after it runs 30 minutes with its intelligent micro-processor technology.

External Charger Operation :

In principle, there are not much differences to run the product with an external charger. Instead of plug it with an adapter you can use a fully charged external charger (power-bank, computer etc) Make sure that the external charger power source is correct.(See. Technical Features)

WARNING

The product should be moved by considering the indicated transport direction on the box and by protecting from high temperatures, fire and impacts in its original package during transportation and shipping.

WARRANTY

- This product is under guarantee of our company for 2 years after date of purchase for the first user. Please contact us or the retailer that you purchased the product from for warranty claims.
- This warranty does not cover wears occur from regular use, defects and damages caused by misuse, abuse and improper storage, failure to comply the manual instructions, malfunctions from using improper components.
- The responsibility of the usage the product belongs to the user.
- Please keep your receipt as a proof of purchase for any warranty claim.

Warranty of the product is 2 years starting from the date of original purchase.
Lifetime of the product is 5 years.

LES CONSIGNES ET LES INSTRUCTIONS

1. Prière de lire attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser le produit.
2. Avant la première utilisation et avant et après chaque utilisation, démontez les pièces du tire-lait ayant contact avec le lait maternel, nettoyez-les soigneusement et stérilisez en faisant bouillir à l'eau pendant 5 minutes ou bien à l'aide d'un stérilisateur Mamajoo. Ne pas stériliser les composants du tire-lait pendant plus longtemps que recommandé afin d'éviter des dommages.
3. Évitez de mouillir et d'exposer à l'humidité l'unité moteur et des composants électriques. Ne JAMAIS stériliser l'unité moteur, le tuyau d'air et les pièces n'ayant pas de contact avec le lait maternel.
4. Lavez les composants mécaniques à la main à l'eau savonneuse tiède et ensuite rincez soigneusement ou bien les lavez dans le panier supérieure d'un lave-vaisselle.
5. Évitez d'utiliser des détergents intensivement, anti bactérien concentrés et les nettoyens puisqu'ils peuvent causer des dommages ou des fissures. En cas de fissure et/ou dommage, cessez d'utiliser ces pièces.
6. Utilisez SEULEMENT l'adaptateur original fourni avec MAMAJOO Tire-lait Electronique USB. Vérifiez si l'appareil est éteint après chaque utilisation et le fil est débranché de la prise électrique.
7. Pour éviter des dommages de l'unité moteur ne pas dépasser la capacité du conteneur du lait maternel / stockage. Utilisez un biberon plus large si vous traitez plus de 120 ml de lait.
8. Gardez le tire-lait électronique hors de la portée des bébés et des enfants.
9. Dur et rapide rythme de traite peut causer la douleur, vérifiez la force d'aspiration est appropriée pour vous.
10. Si le coussin de confort en silicone n'est pas placé correctement à l'entonnoir, le lait va couler. Vérifiez-le avant chaque utilisation.
11. En cas d'un problème, débranchez le fil de la prise électrique ou le chargeur externe. Contactez nous pour être dirigé à notre service technique.
12. Ne tirez pas le bouchon (p) de Mamajoo Tire-lait Electronique USB Double trop forcé
13. Prière de suivre toujours les consignes de sécurité et d'emploi. Notre société ne peut pas être tenue responsable des dommages causées par l'utilisation impropre.

CONSEILS D'ENTRETIEN

1. Nettoyez l'unité moteur SEULEMENT avec un chiffon propre et sec. Ne pas utiliser des détergents abrasives et des produits anti-bactériens pour nettoyer le tire-lait.
2. Vérifiez régulièrement si l'assemblage du tuyau d'air est correcte et la membrane n'est pas endommagée.
3. Le corps du tire-lait et les pots de conservation de lait peuvent être lavés dans un lave-vaisselle, pourtant les aliments peuvent décolorer ces pièces.



Le tube ne peut pas être stérilisé ou lavé. L' eau laissé dans le tube peut détruire la partie moteur.

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Fournit un contrôle parfait grâce à la technologie intelligente avancée de microprocesseur. Le procès et les signaux peuvent être facilement suivre sur l'indicateur LED. On vous offre la facilité de charger avec un chargeur externe (powerbank) pour utilisation mobile. Le chargeur externe doit avoir un réelle valeur minimum 2600 mA.

Nom du Produit: Mamajoo Tire-Lait Electronique USB Double

Modèle: MMJ2858

Adaptateur: Input: 100- 240V ~ 50/60Hz Output: 5-6V 1A DC

Durée de Fonctionnement: 0-30 minutes

Poids: 0.170 kg


Nom du Produit: Mamajoo Tire-Lait Electronique USB Simple

Modèle: MMJ2841

Adaptateur: Input: 100- 240V ~ 50/60Hz Output: 5-6V 1A DC


Durée de Fonctionnement: 0-30 minutes

Poids: 0.150 kg

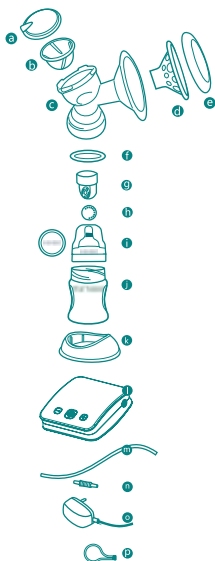

Les Composants de Tire-Lait Electronique USB Double

- a) Couvercle cylindrique
- b) Diaphragme en silicone
- c) Corps du tire-lait
- d) Coussin de confort en silicone
- e) Couvercle d'hygiène de tire-lait
- f) Bague d'étanchéité en silicone
- g) Valve
- h) Membrane
- i) Disque d'étanchéité pour biberon
- j) Pot de conservation de lait maternel (150 ml)
- k) Base de pot de conservation
- l) Unité moteur
- m) Tuyau d'air
- n) Tuyau d'air - Pièce pour insérer le tuyau d'air dans l'unité moteur
- o) Adaptateur AC
- p) Bouchon

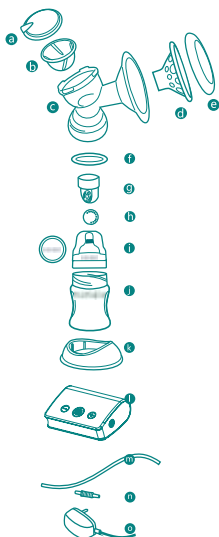


Les Composants de Tire-lait Electrique USB Simple

- a) Couvercle cylindrique
- b) Diaphragme en silicone
- c) Corps du tire-lait
- d) Coussin de confort en silicone
- e) Couvercle d'hygiène
- f) Bague d'étanchéité en silicone
- g) Valve
- h) Membrane
- i) Disque d'étanchéité pour biberon
- j) Pot de conservation de lait maternel (150 ml)
- k) Base de pot de conservation
- l) Unité moteur
- m) Tuyau d'air
- n) Tuyau d'air - Pièce pour insérer le tuyau d'air dans l'unité moteur
- o) Adaptateur AC

Lavez-vous vos mains soigneusement avant l'assemblage.
 Avant l'utiliser lavez et stérilisez les pièces mécaniques du tire-lait.



Placez correctement la membrane au dessus de la valve dans une position plate.

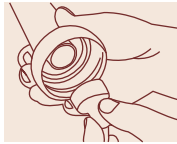

Enfoncez et insérez la valve aussi bien que possible sur le corps du tire-lait.



Placez fermement le coussin de confort dans le corps du tire-lait par sa bouche.



Placez le diaphragme en silicon dans le corps du tire-lait et assurez-vous qu'il est proprement fixé dans sa place.



Vissez le couvercle cylindrique sur le corps du tire-lait en le faisant tourner.




Insérez le bout du tuyau d'air dans l'entrée située sur le couvercle cylindrique.



Assemblez le pot ou le biberons dans lequel vous allez extraire le lait, au corps du tire-lait.




Pour usage mobile branchez la prise USB à la sortie de la source charge.

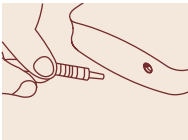

Le Tire-lait double

Insérez l'autre bout du tuyau d'air dans l'entrée de l'unité moteur.

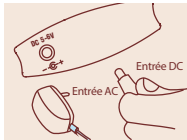


Le Tire-lait double

Insérez la fiche métallique qui est au bout du câble d'adaptateur, dans l'entrée d'adaptateur située sur l'unité moteur. Branchez ensuite la fiche d'adaptateur (5V-6V) sur la prise électrique.




Le Tire-lait double

En usage pour un sein, soyez sûr que le bouchon est placé fermement à la deuxième sortie. En cas d'un échappement d'air le tire-lait ne va pas marcher correctement.

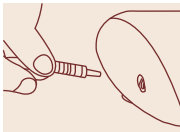

Le Tire-lait Simple

Insérez l'autre bout du tuyau d'air dans l'entrée de l'unité moteur.

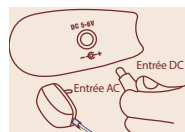

Le Tire-lait Simple

Insérez la fiche métallique qui est au bout du câble d'adaptateur, dans l'entrée d'adaptateur située sur l'unité moteur. Branchez ensuite la fiche d'adaptateur sur la prise électrique.

GUIDE L'INDICATEUR LCD

Mamajoo Tire-lait Electronique USB Double



8 différents choix pour mode de massage



12 différents choix d'aspiration



Mode de massage pour deux seins
Marche en 3ème niveau


Exemple



Mode d'expression de lait pour un sein
Marche en 7ième niveau

Panneau de Contrôle

- a) Mode de massage/d'aspiration pour un sein
- b) Mode de massage/d'aspiration pour deux seins
- c) Bouton marche/arrêt et bouton de changement mode pour un sein/deux seins
- d) Bouton pour diminuer l'aspiration
- e) Bouton pour augmenter l'aspiration
- f) Indicateur de Niveau LED

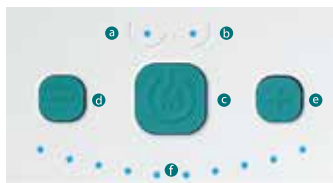

Mamajoo Tire-Lait Electronique USB Simple




5 différents choix pour mode de massage



10 différents choix d'aspiration

Panneau de Contrôl

- a) Mode de massage
- b) Mode d'aspiration
- c) Bouton marche/arrêt et bouton pour changement le mode
- d) Bouton pour diminuer l'aspiration
- e) Bouton pour augmenter l'aspiration
- f) Indicateur de Niveau LED

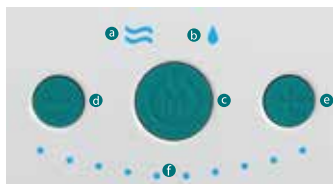

UTILISATION

Avec Adaptateur:

1. Assurez-vous que le tire-lait est assemblé correctement.
2. Quand vous voudriez utiliser votre Mamajoo Tire-Lait Electronique USB Double pour expression d'un seul sein, placez le bouchon qui se trouve sur l'unité moteur à l'entrée de deuxième tuyau d'air d'aspiration qui se trouve sur l'unité moteur.
3. Asseyez-vous sur une chaise confortable et utilisez le tire-lait avec votre main de choix. Prière de ne pas l'utiliser en position couchée.
4. Centrez bien le coussin de confort sur votre mamelon et assurez-vous qu'il couvre votre sein complètement et solidement.
5. Branchez le produit, appuyez sur le bouton marche/arrêt pour démarrer l'aspiration. Nous conseillons de commencer en mode de massage pour stimuler l'écoulement de lait.
6. Wir empfehlen die Pumpe zunächst in Massage-Modus zu benutzen um den Milchfluss zu simulieren.
- 6.1. Si vous appuyez le bouton marche/arrêt de Mamajoo Tire-Lait Electronique USB Simple une fois, indicateur LED pour le mode de massage va s'allumer coin en haut à gauche, si vous appuyez une deuxième fois, indicateur LED pour d'aspiration va s'allumer coin en haut à droit. Le mode de massage est pour stimuler la réflexe de "let-down" comme le bébé commence à sucer le sein de la mère. Pendant la première 5 étapes pour des modes de massage, après chaque 10 courts d'aspiration un long tire va se réaliser et quand votre lait démarre s'écouler de votre sein appuyez le bouton "Marche/Arrêt" encore une fois pour passer au mode d'expression de lait. En mode d'expression de lait, vous pourriez choisir le niveau entre 1 et 10. Et vous pourriez régler la force d'aspiration pour vous avec les boutons "+" ou "-". Les mères qui ont des problèmes ou sensibilité mamelons pourraient faire expression de lait en mode massage. Mamajoo Tire-Lait Electronique USB Simple met en mémoire l'étape utilisée dernièrement grâce à sa technologie intelligente avancée microprocesseur. Le tire-lait va commencer à marcher en mode de massage et en le même niveau pour la prochaine fois.
- 6.2. Quand vous appuyez le bouton marche/arrêt, Mamajoo Tire-Lait Electronique USB Double/Simple va marcher en mode simple pour offrir le choix d'utilisation double ou simple à la mère. Pour l'utilisation double ou simple, les premières 4 étapes sont pour le mode de massage, les étapes entre 5 et 10 sont pour le mode d'expression de lait. Le mode massage est pour stimuler la réflexe de "let-down" comme le bébé commence à sucer le sein de la mère. En mode de massage (premier 4 étapes), après chaque 10 courts d'aspiration un long tire va se réaliser et quand démarre s'écouler de votre sein appuyez le bouton "+" pour passer au mode d'expression de lait. En mode d'expression de lait, vous pourriez choisir le niveau d'aspiration entre 5 et 10. Les mères qui ont des problèmes ou sensibilité mamelons pourraient faire expression de lait en mode massage. Si vous voudriez utiliser le tire-lait pour un sein soyez sur que le mode d'expression de lait est pour le tire-lait simple. Mamajoo Tire-Lait Electronique USB Double/Simple met en mémoire l'étape utilisée dernièrement grâce à sa technologie intelligente avancée microprocesseur. Le tire-lait va commencer à marcher en mode simple et en le même niveau pour la prochaine fois.

7. Éteignez le tire-lait en appuyant sur le bouton marche/arrêt pour 2 seconds quand l'expression de lait est terminée et débranchez-le. Enlevez le pot de conservation dans lequel vous venez d'extraire votre lait. Fermez le pot de conservation à l'aide d'un disque d'étanchéité et mettez-le dans le réfrigérateur ou le congélateur ou nourrissez directement votre bébé.
8. Mamajoo Tire-Lait Electronique USB s'éteint automatiquement après avoir fonctionné en mode d'expression pendant 30 minutes grâce à la technologie intelligente avancée de microprocesseur.

Avec Chargeur Externe:

En principe, utilisation d'un chargeur externe n'est pas différent d'un adaptateur, au lieu de brancher le produit à un adaptateur avec le lien de prise électrique, vous pourriez le brancher à un chargeur externe avec une batterie pleine (powerbank, ordinateur etc) avec le point liaison USB. Soyez sûr que la force de la source charge externe est correcte. (Voyez: Les Caractéristiques Technique)

AVERTISSEMENT

Soyez attentive en emportant et pendant le transport du produit contre de la haute chaleur, du feu et des coups, ne le gardez pas dans les endroits humides et mouillés.

GARANTIE

1. Ce produit est sous la garantie de notre société pendant 2 ans à partir de la date d'achat, pour le premier utilisateur. Pour des réclamations sous garantie, veuillez contacter notre société ou le revendeur d'où vous avez acheté le produit.
2. La présente garantie ne couvre pas les dommages causés par des utilisations impropres, d'emploi abusif, mauvais rangement, non-respect des instructions, altération et modification du produit par utilisateur et les dommages dues à l'usure normale.
3. Toute responsabilité concernant utilisation du produit appartient à l'utilisateur
4. Pour faire une réclamation en vertu de Garantie, conserver la facture comme preuve d'achat.

La garantie de ce produit est 2 ans depuis la date d'achat.

La durée de vie de ce produit est 5 ans.

UYARILAR

1. Ürünü kullanmaya başlamadan önce kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz.
2. İlk ve her kullanımdan önce ve sonra pompanızın anne sütü ile temas eden tüm parçalarını sökünüz, iyice yıkayınız ve MAMAJOO buhar sterilizörlerini kullanarak veya suda 5 dakika kaynatarak steril ediniz. Pompa bileşenlerinin hasar görmemesi için tavsiye edilenden daha uzun süre steril etmeyiniz.
3. Motor ünitesini ve elektrik aksamını suya ve neme maruz bırakmayınız, ıslak bez ile temizlemeyiniz. Motor ünitesi, pompa hava tüpü ve anne sütü ile temas etmeyen parçaları ASLA steril etmeyiniz.
4. Pompa mekanik parçalarını ılık sabunlu su ile elde yıkayıp iyice durulayınız veya bulaşık makinesinin üst sepetinde yıkayınız.
5. Ürüne zarar verebileceği ve çatlamalara neden olabileceğinden anti bakteriyel deterjan ve temizleyicilerle temizledikten kaçınınız. Böyle bir durum olduğunda bu parçaları kullanmayınız.
6. MAMAJOO Elektronik USB Göğüs Pompalarını SADECE orijinal adaptörü ile çalıştırınız. Her kullanımdan sonra kapalı olduğunu kontrol ediniz ve prizden çıkartınız.
7. Motor ünitesinin zarar görmemesi için süt sağım / saklama kabının kapasitesini aşmayınız. 120 ml den daha fazla süt sağıyorsanız, lütfen büyük biberon kullanınız.
8. Bebeklerin ve küçük çocukların erişebileceği yerlerden uzak tutunuz.
9. Çok sert ve hızlı sağım ritmi ağrıya neden olabileceğinden pompanın çekim gücünün size uygun olduğundan emin olunuz.
10. Silikon konfor başlığı pompanın huni kısmına tam olarak oturmadığında süt silikon konfor başlığından akacağından her kullanımda kontrol ediniz.
11. Bir sorun oluştuğunda, ürünü fişten ya da harici şarj cihazından çıkartınız. Servis gerekli olduğunda, sizi yetkili teknik servisimize yönlendirebilmemiz için bizimle iletişime geçiniz.
12. Mamajoo Elektronik USB Çiftli Göğüs Pompasının tıpasını (p) kuvvetli şekilde çekmemeye özen gösteriniz.
13. Kullanım kurallarına her zaman uyunuz. Firmamız uygunsuz kullanımdan kaynaklanan herhangi bir zarar için sorumlu tutulamaz.

BAKIM

1. Motor ünitesini SADECE kuru bir bezle temizleyiniz. Ürünü temizlemek için parlatici, aşındırıcı veya anti- bakteriyel malzemeler kullanmayınız.
2. Hava tüpü bağlantılarının tam ve valf kapağının herhangi bir zarar görmemiş olduğunu düzenli olarak kontrol ediniz.
3. Pompa gövdesi ve süt saklama kapları bulaşık makinesinde güvenle yıkanabilir ancak gıdalardan gelen renklerden dolayı renk değişimi olabilir.



Hortum steril edilmemeli ve yıkanmamalıdır. Hortumun içinde kalan su, motor parçalarına zarar verir.

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Gelişmiş akıllı mikroişlemci teknolojisi sayesinde tam kontrol sağlar. İşlem ve işaretler LED gösterge ile kolayca izlenir. Mobil kullanımlar için harici şarj cihazı (powerbank) ile kullanım imkanı sunar. Harici şarj cihazı minimum 2600 mA gerçek değerinde olmalıdır.

Ürün Adı: Mamajoo Elektronik USB Çiftli Göğüs Pompası

Model: MMJ2858

Adaptör: Input: 100- 240V ~ 50/60Hz Output: 5-6V 1A DC

Çalışma süresi: 0-30 dakika

Ağırlık: 0.170 kg


Ürün Adı: Mamajoo Elektronik USB Tekli Göğüs Pompası

Model: MMJ2841

Adaptör: Input: 100- 240V ~ 50/60Hz Output: 5-6V 1A DC


Çalışma süresi: 0-30 dakika

Ağırlık: 0.150 kg

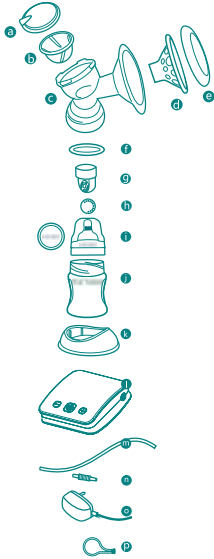

Elektronik USB Çiftli Göğüs Pompası ürün içeriği

- a) Silindir kapak
- b) Silikon diyafram
- c) Pompa gövdesi
- d) Silikon konfor başlığı
- e) Pompa hijyen kapağı
- f) Sızdırmaz silikon conta
- g) Valf
- h) Valf Kapağı
- i) Biberon emziği ve kapatma halkası
- j) Anne sütü saklama kabı (150 ml)
- k) Saklama kabı denge tabanlılığı
- l) Motor ünitesi
- m) Hava tüpü
- n) Hava tüpü - motor ünitesi giriş parçası
- o) AC adaptörü
- p) Tıpa

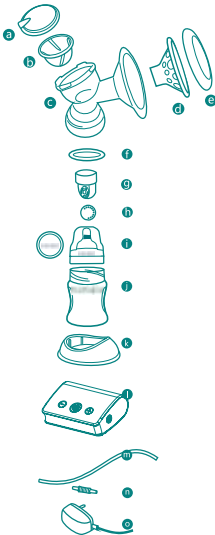

Elektronik USB Tekli Göğüs Pompası ürün içeriği


- a) Silindir kapak
- b) Silikon diyafram
- c) Pompa gövdesi
- d) Silikon konfor başlığı
- e) Pompa hijyen kapağı
- f) Sızdırmaz silikon conta
- g) Valf
- h) Valf Kapağı
- i) Biberon emziği ve kapatma halkası
- j) Anne sütü saklama kabı (150 ml)
- k) Saklama kabı denge tabanlılığı
- l) Motor ünitesi
- m) Hava tüpü
- n) Hava tüpü - motor ünitesi giriş parçası
- o) AC adaptörü

MONTAJ

Pompayı elinize almadan önce ellerinizi iyice yıkayınız. Kullanmadan önce göğüs pompanızın mekanik parçalarını yıkayıp steril ediniz.



Valf kapağını düz pozisyonda valfin üzerine tam olarak takınız.

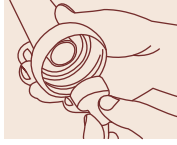

Valfi pompa gövdesine sıkıca iterek takınız.



Silikon konfor başlığını pompa gövdesinin ağız kısmına sıkıca yerleştiriniz.



Silikon diyaframı pompa gövdesine yerleştiriniz ve tam oturduğundan emin olunuz.



Silindir kapağı pompa gövdesinin üzerine çevirerek takınız.




Silindir kapak üzerinde bulunan girişe hava tüpünün ucunu takınız.



Şağım yapacağınız süt saklama kabı/biberonu pompa gövdesine takınız.




Mobil kullanımlar için USB fişini şarj kaynağı çıkışına takınız.

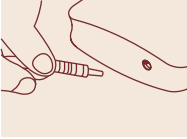


Çiftli Pompa

Hava tüpünün diğer ucunu motor ünitesinin hava girişine sıkıca takınız.

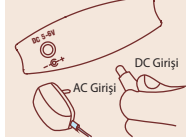


Çiftli Pompa

Adaptör kablosunun ucundaki metal fişi, motor ünitesindeki adaptör girişine sıkıca takınız. (5V-6V) Adaptör fişini elektrik prize takınız. (110V-220V)

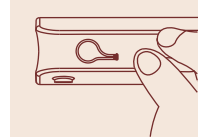


Çiftli Pompa

Tekli kullanımda tıpanın ikinci çıkışa sıkıca takılı olduğundan emin olunuz. Buradan hava kaçışı olduğunda pompa çekim yapmayacaktır.

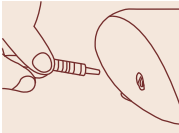

Tekli Pompa

Hava tüpünün diğer ucunu motor ünitesinin hava girişine sıkıca takınız.

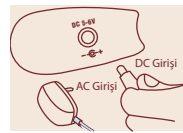

Tekli Pompa

Adaptör kablosunun ucundaki metal fişi, motor ünitesindeki adaptör girişine sıkıca takınız. Adaptör fişini elektrik prize takınız.

LED GÖSTERGE KILAVUZU

Mamajoo Elektronik USB Çiftli Göğüs Pompası



8 farklı masaj modu kademe seçeneği



12 farklı çekim modu kademe seçeneği



Çiftli masaj modunda
3. kademede çalışmakta


Örnek



Tekli çekim modunda
7. kademede çalışmakta

Kontrol Paneli

- Tek göğüs masaj/çekim konumu
- Çift göğüs masaj/çekim konumu
- Açma/Kapama ve tekli/çiftli konum değiştirme tuşu
- Çekim azaltma tuşu
- Çekim arttırma tuşu
- Led seviye göstergesi

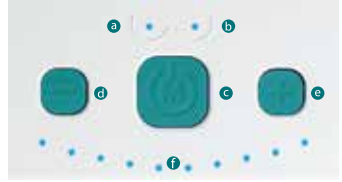

Mamajoo Elektronik USB Tekli Göğüs Pompası




5 Farklı masaj modu seçeneği



10 Farklı çekim gücü seçeneği

Kontrol Paneli

- Masaj konumu
- Çekim konumu
- Açma/Kapama ve masaj/çekim konum değiştirme tuşu
- Çekim azaltma tuşu
- Çekim arttırma tuşu
- Led seviye göstergesi

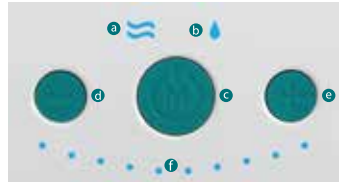

ÇALIŞTIRMA

Adaptör ile :

1. Pompanızın doğru monte edildiğinden emin olunuz.
2. Mamajoo Elektronik USB Çiftli Pompanızı tekli olarak kullanmak istediğinizde motor ünitesinde bulunan ikinci sağım hava tüpü giriş ucunu motor ünitesinin üzerinde bulunan tıpa ile sıkıca kapatınız.
3. Kendinizi rahat hissedebileceğiniz bir koltuğa oturunuz ve pompayı daha rahat kullandığınız elinize alınız. Lütfen pompanızı yatarak kullanmayınız.
4. Pompanızın silikon konfor başlığını göğüs ucunuzu ortalayacak şekilde yerleştiriniz ve hava almaksızın göğsünüze tam oturduğundan emin olunuz.
5. Ürünü fişe takınız, "Açma/Kapama" tuşuna basarak çalıştırınız ve çekim işlemini başlatınız. Sütünüzün kolayca gelmesini sağlamak için pompanızı önce masaj konumunda kullanmanızı öneriniz.
6. Mamajoo göğüs pompaları bebeğin doğal emme ritmini taklit eder.
- 6.1. Mamajoo Elektronik USB Tekli Göğüs Pompasının Açma/Kapama tuşuna bir kez bastığınızda sol üstteki masaj modu LED göstergesi, ikinci kez bastığınızda sağ üstteki çekim modu LED göstergesi yanacaktır. Masaj modu, bebeğin anneyi emmeye başladığında yaptığı gibi sütün gelmesini sağlayan "let-down" refleksini uyarmak içindir. Masaj modu olan ilk 5 kademede her 10 kısa çekimden sonra bir uzun çekim gerçekleşir ve sütünüz gelmeye başladığında "Açma/Kapama" tuşuna tekrar basarak çekim moduna geçebilirsiniz. Çekim modunda 1-10 arası istediğiniz çekim gücü kademesini seçebilirsiniz ve "+" veya "-" tuşları sayesinde size uygun olan çekim gücünü ayarlayabilirsiniz. Göğüs ucu problemleri ve hassasiyetleri olan anneler masaj modunda da sağım yapabilir. Mamajoo Elektronik USB Tekli Göğüs Pompası, akıllı mikro işlemci teknolojisi ile en son bıraktığınız kademeleri hafızasına kaydeder. Bir sonraki kullanımda pompanız masaj modunda ve o kademelerde açılacaktır.
- 6.2. Mamajoo Elektronik USB Çiftli / Tekli Göğüs Pompasının Açma/Kapama tuşuna bastığınızda anneye tekli veya çiftli kullanım seçeneği sağlamak amacıyla tekli kullanımda başlar. Hem tekli hem de çiftli kullanımlarda da ilk 4 kademe masaj modu için, 5-10 arası kademeler ise çekim modu içindir. Masaj modu, bebeğin anneyi emmeye başladığında yaptığı gibi sütün gelmesini sağlayan "let-down" refleksini uyarmak içindir. Masaj modu olan ilk 4 kademede her 10 kısa çekimden sonra bir uzun çekim gerçekleşir ve sütünüz gelmeye başladığında "+" tuşuna basarak çekim moduna geçebilirsiniz. Çekim modunda 5-10 arası istediğiniz çekim gücü kademesini seçebilirsiniz. Göğüs ucu problemleri ve hassasiyetleri olan anneler masaj modunda da sağım yapabilir. Tekli çekim yapmak istediğinizde pompanın tekli çekim modunda olduğundan ve tıpayı (P) kapattığınızdan emin olunuz.

Mamajoo Elektronik USB Çiftli / Tekli Göğüs Pompası, akıllı mikro işlemci teknolojisi ile en son bıraktığınız kademeleri hafızasına kaydeder. Bir sonraki kullanımda pompanız tekli modunda ve o kademelerde başlayacaktır.

7. Sağım işlemi bitirdiğinizde, göğüs pompanızın "Açma/Kapama" tuşuna 2 saniye basarak kapatınız ve ürünü prizden çıkartınız. Sağım yaptığınız anne sütü saklama kabını pompa gövdesinden çıkartınız. Saklama kabının ağzını Mamajoo kapatma halkası ile kapatarak anne sütünü buzdolabına veya dondurucuya koyabilir ya da doğrudan bebeğinizi besleyebilirsiniz.
8. Mamajoo Elektronik USB Göğüs Pompaları , akıllı mikro işlemci teknolojisi sayesinde 30 dakika çalıştıktan sonra otomatik olarak kapanır.

Harici şarj ile :

Prensipte ürünü harici şarj ile çalıştırmada herhangi bir fark bulunmamakla birlikte, adaptör ile priz bağlantısı yerine ürünü dolu olduğundan emin olduğunuz bir harici şarj cihazına (powerbank, bilgisayar vb) USB bağlantı noktası ile bağlayabilirsiniz. Kullandığınız harici şarj kaynağının gücünün doğruluğundan emin olunuz. (Bkz Teknik Özellikler)

UYARI

- Ürünler taşıma ve nakliye esnasında orijinal ambalajında, kutu üzerinde belirtilen taşıma yönü dikkate alınarak, yüksek dereceli sıcaklıklardan, ateşten ve darbelerden korunarak taşınmalıdır, ıslak ve rutubetli ortamlarda muhafaza edilmemelidir.
- Ürünün ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında kanunun 11. Maddesinde yer alan;Sözleşmeden dönme, Satış bedelinden indirim isteme, Ücretsiz onarılmasını isteme, Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme haklarından birini kullanabilir.
- Tüketiciler ürün ile ilgili şikayet ve itiraz konusunda başvurularını tüketici mahkemelerine ve ikamet ettiği ilçe tüketim heyetlerine yapabilirler.

GARANTİ

1. Bu ürün ilk kullanıcısı için normal kullanım süresi olan 2 yıl boyunca şirketimizin garantisi altındadır. Garanti başvuruları için lütfen ürünü satın aldığınız bayi veya şirketimizle iletişime geçiniz.
2. Yanlış kullanım, kötü veya yanlış saklama, kullanım kurallarına uyulmaması ve bileşenlerin uygunsuz kullanımı sonucu oluşan arıza ve hasarlar ile normal kullanım kaynaklı yıpranmalar garanti kapsamı dışındadır.
3. Ürünün kullanımı ile ilgili sorumluluk kullanıcıya aittir.
4. Herhangi bir garanti talebinde bulunmak için lütfen satın alma faturanızı ve garanti belgenizi saklayınız.

Ürünün garantisi satın alındığı tarihten itibaren 2 yıldır.

Bu ürünün kullanım ömrü 5 yıldır.

mamajoo



www.facebook.com/mamajoo



www.instagram.com/mamajootr

Üretici / Manufacturer

abc lisans

ABC Lisans Üretim Sağlık Ürünleri

İç ve Dış. Tic. Ltd. Şti.

Mimar Sinan Mah. Özgürlük Cad. No:77/1-2-3-4

Sultanbeyli-İSTANBUL

Tel: 0216 573 62 00 (pbx) E-Mail: info@mamajoo.com

mamajoo GmbH

Technologie Park

Eupener Straße 161A Eingang 76

50933 Köln Germany

Tel: 0221 168 489 00 E-mail: info@mamajoo.de

www.mamajoo.de

Türkiye Dağıtıcı Firma / Distributor

www.grupbaby.com

